


LAGON 2000

L'intégration des examens médicaux

Vision, audiométrie, spirométrie, biométrie, cardiométrie

L'exploration LAGON2000

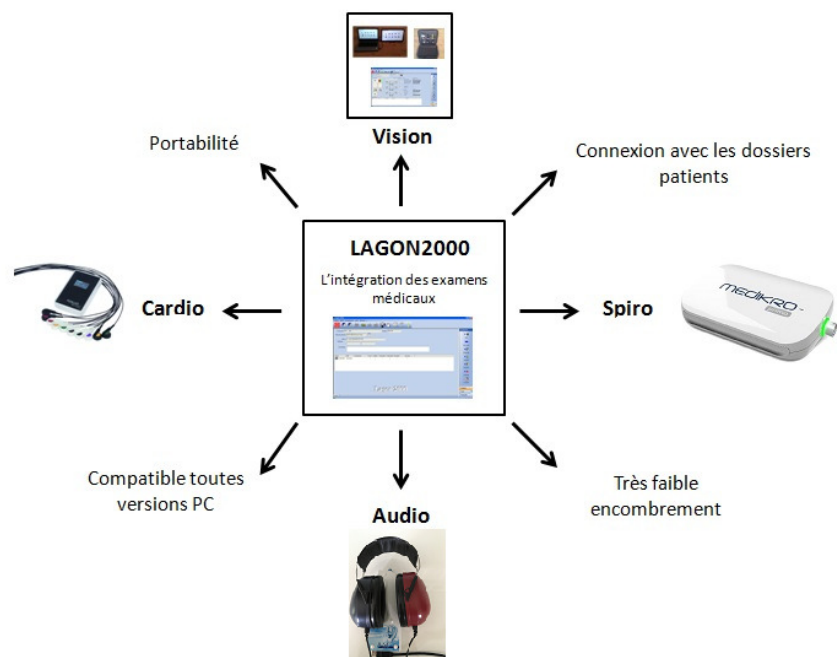

Logiciel compatible sur tous les PC fonctionnant avec Windows 7, 8, 10 et 11

Lancement rapide et simple des :

Tests de vision
Tests d'audiométrie
Mesures de biométrie
Tests de spirométrie
E.C.G.

En option:
Eblouissement (EB 2100)
Champ Visuel (CV2100)

Enregistrement automatique des données dans la base

Développé par une équipe de spécialistes des logiciels médicaux et validé par des experts en médecine du travail, LAGON 2000 permet une évaluation complète de la vision, de l'audition, de la biométrie de la spirométrie et de la cardiologie.

Pour effectuer des tests adaptés aux différents postes de travail il est possible de lancer les protocoles permettant l'enchaînement automatique des tests.

Toutes les mesures sont automatiquement enregistrées dans la base de données et sont consultables par un simple click, offrant une lecture médicale aisée.

LAGON 2000 est connecté aux logiciels médicaux de la médecine du travail, des Pompiers, des Centre d'Examen de Santé et des Centres de Gestion.

JLM Médical
60 rue de Sartrouville
Bat 6

78230 Le Pecq

Téléphone : (33) 1 30 15 16 90


Fax : (33) 1 30 53 43 78

Mail : ventes@jlmmedical.fr

Description de LAGON 2000

Vision

- Vision des formes: Acuité visuelle, astigmatisme et duochrome, contrastes...)
- Vision des couleurs: Type Ishihara
- Vision du relief: Phorie
- Champ visuel et éblouissement

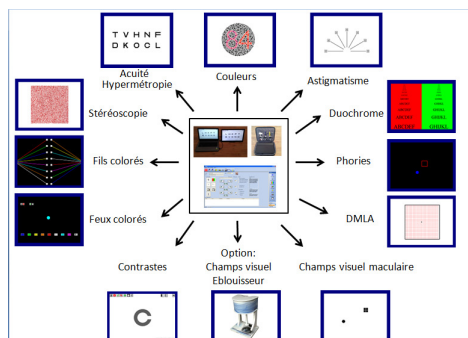

Audio

LAGON 2000 permet d'effectuer les tests d'audiométrie rapidement en mode manuel ou en mode automatique, en explorant des séries de fréquences prédéfinies. Les données peuvent être comparées avec des valeurs de références et avec des examens précédents.



Spirométrie

- Medikro Nano : Le plus petit spiromètre au monde. Une examen spirométrique complet avec un encombrement réduit. Connexion USB. Capteurs précalibrés.
- Medikro Pro : Le nec plus ultras de la spirométrie avec capteur météo en temps réel.



- Schiller MS 12 Blue : ECG Sans fil ou USB
- Cardionics: Cardioplug 2

Cardiologie

Caractéristiques techniques :

- LAGON est compatible avec Windows 7, 8, 10 et 11.
- Une résolution :minimale de 1024 x 768 est nécessaire pour une réalisation optimale des tests de vision des formes.
- LAGON2000 peut être installé sur des ordinateurs disposant d'au moins 40 Mo d'espace libre sur le disque dur.
- LAGON2000 est installé en option avec l'éblouisseur EB-2100 (dispositif permettant une réalisation de tests d'éblouissement sous contrôle de l'ordinateur à l'aide d'une source étalonée) et le champ visuel CV-2100 (permettant de faire des tests allant de 120° en temporal à 30° en nasal et une amplitude de 60 ° en vertical).
- LAGON2000 est un dispositif médical de classe I conforme aux normes :
CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN 60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971, EN ISO 10938, EN ISO 15104-1, EN 62304, EN 62366, NB-MED/2.2/Rec4



SAS JLM MEDICAL, 60 route de Sartrouville, parc des grillons, bat 6, 78230 Le Pecq - SIRET 52327692100039
Tel (33) 1 30 15 16 90 – Fax (33) 1 30 53 43 78– mail : ventes @jlmmedical.fr—site : www.jlmmedical.fr

E-4-2-3 P-4.1.12